



3.00



Catalogo Prodotti



Muoversi liberamente significa disporre di una corretta accessibilità

Stepless si è specializzato nel superamento delle barriere architettoniche con l'intenzione di creare condizioni d'accessibilità corrette per tutti coloro che hanno una mobilità limitata. Disponiamo di un'ampia gamma di prodotti che spazia in tutti i campi, dalle piccole rampe per le porte domestiche a quelle portatili ed ai sistemi di rampe per piattaforme di sollevamento, ascensori ed elevatori per scale. Questa gamma completa permette quindi di trovare la soluzione ideale in grado di soddisfare al meglio le necessità personali.

Oltre 29 anni d'esperienza

Stepless è una divisione di Guldmann, che ha oltre 29 anni d'esperienza nello sviluppo di strumenti ausiliari per persone disabili, pensati per migliorare la qualità della loro vita. Tutti i prodotti sono stati testati in conformità alle più severe normative in tema di sicurezza e posseggono un design sicuro e senza tempo adatto sia nel privato che nel pubblico. Disponiamo di un reparto di sviluppo proprio, nonché di un team di assistenza che viene continuamente formato e aggiornato.

Obiettivo accessibilità

Negli ultimi anni l'obiettivo principale è stato quello di aumentare l'accessibilità per le persone con disabilità fisiche. In tutto il mondo si stanno incrementando le leggi che riguardano l'accessibilità, negli ambiti pubblici e privati, nonché nel trasporto pubblico, e questa tendenza è in continuo aumento.

Siamo sempre all'avanguardia per quanto concerne le regolamentazioni e la legislazione applicabili agli edifici e siamo sempre in stretto contatto con architetti e consulenti per trovare soluzioni di qualità nel settore dell'accessibilità.

Grazie ad un'ampia gamma di prodotti, il nostro scopo è quello di creare condizioni di accessibilità di qualità nell'ambiente circostante per persone con difficoltà di deambulazione, per utenti di sedie a rotelle e simili, che hanno una mobilità ridotta.

RAMPE 4

Rampe portatili
Rampe per gradini e piastre di copertura (coprisoglia)
Rampe Excellent



SISTEMA A RAMPE FISSE 10



PIATTAFORMA DI SOLLEVAMENTO 12

LP1 – 500 mm
LP5 – 500 mm
LP5+ – 875 mm
LP8 – 3059 mm



TRASPORTO PUBBLICO 15

Rampe portatili
Soluzioni su misura per rampe per treni
LP11
LP12



RAMPE

Le rampe vengono utilizzate per superare i gradini e i bordi dei marciapiedi, quando occorre mettere la sedia a rotelle su una macchina oppure quando occorre compensare una differenza d'altezza relativamente piccola.



Rampa fissa

Particolarmente adatta per superare differenze d'altezza uniformi, dove occorre installare impianti dal peso minimo e dove la rampa è utilizzata spesso nello stesso posto.



Rampa telescopica

Una rampa flessibile che può essere utilizzata in molti luoghi e diversi incrementi d'altezza, laddove l'altezza e la lunghezza possono variare. Non richiede molto spazio quando non viene utilizzata.



Rampa pieghevole

Particolarmente adatta per differenze d'altezza uniformi. Non richiede molto spazio quando non viene utilizzata ed è più facile da trasportare rispetto alle rampe fisse.

Art. nr.	Lunghezza mm	Peso kg/pz	Portata max/kit
30000-050	500	1,5	350
30000-105	1050	3,2	350
30000-130	1300	3,9	350
30000-155	1550	4,7	350
30000-200	2000	6,0	200

Art. nr.	Lunghezza mm	Peso kg/pz	Portata max/kit
30015-100	1000/677	4,3	350
30015-150	1500/927	5,7	350
30015-200	2000/1177	7,2	350
30015-250	2500/1427	8,6	200
30015-300	3000/1677	10,1	200


Art. nr.	Lunghezza mm	Peso kg/pz	Portata max/kit
30020-110	1100/580	4,0	350
30020-160	1600/830	5,7	350
30020-210	2100/1080	7,2	350
30020-260	2600/1330	8,6	200
30020-310	3100/1580	10,1	200



Passa cordolo per soglie delle porte – per gradini

I gradini degli ingressi creano impedimento alle sedie a rotelle, ai deambulatori e alle altre strumentazioni ausiliarie per i disabili. Questi impedimenti possono essere eliminati per sempre togliendo i cordoli esistenti ed installando una piastra di copertura Stepless al di sopra della rientranza sottostante.

Materiale: estruso d'alluminio o alluminio color bronzo/champagne con protezione antiscivolo integrata (solchi).

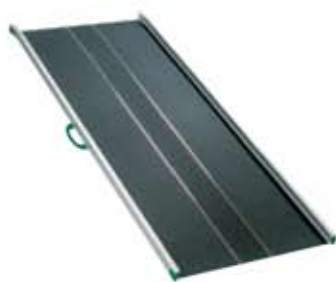


Rampa fissa larga

Particolarmente adatta per rampe permanenti oppure per rampe che vengono sempre utilizzate nello stesso posto. Garantisce una sicurezza maggiore sia per l'utente che per l'assistente. Ottima per scooter o sedie a rotelle elettriche, laddove il comfort rappresenta il punto chiave.

Art. nr.	Lunghezza mm	Peso kg	Portata max
30030-100	1000	9,7	325
30030-125	1250	12,1	325
30030-150	1500	14,4	325
30030-200	2000	19,1	325
30030-300	3000	28,6	200

Art. nr.	Tipo	Lunghezza x larghezza mm
780105	Piastra di copertura in alluminio, color bronzo/champagne	1800 x 105
780130	Piastra di copertura in alluminio, color bronzo/champagne	1800 x 130
780155	Piastra di copertura in alluminio, color bronzo/champagne	1800 x 150
780180	Piastra di copertura in alluminio, color bronzo/champagne	1800 x 180
780199	Piastra di copertura in alluminio, color alluminio (senza scanalature)	1800 x 50
780200	Piastra di copertura in alluminio, color alluminio	1800 x 80
780201	Piastra di copertura in alluminio, color alluminio	1800 x 105
780202	Piastra di copertura in alluminio, color alluminio	1800 x 130
780204	Piastra di copertura in alluminio, color alluminio	1800 x 150
780206	Piastra di copertura in alluminio, color alluminio	1800 x 180

Carico massimo 350 kg

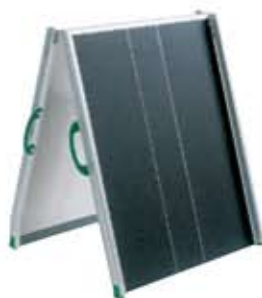

Rampa larga pieghevole

Adatta per l'installazione sempre nello stesso posto nonché per l'installazione nelle macchine. Garantisce una sicurezza maggiore sia per l'utente che per l'assistente. Ottima per scooter o sedie a rotelle elettriche, laddove il comfort rappresenta il punto chiave. Richiede meno spazio di quella fissa quando non viene utilizzata.

Art. nr.	Lunghezza mm	Peso kg	Portata max
30040-150	1500/780	17,5	325
30040-200	2000/1030	22,2	325
30040-250	2500/1280	26,9	200
30040-300	3000/1530	31,7	200

Passa cordolo per soglie delle porte

Questa rampa viene collocata al di sopra dei gradini stessi, facilitando l'approccio da entrambi i lati.

Materiale: piastra in alluminio piegato da 3 mm con rivestimento nero antiscivolo.

Art. nr.	L x L x A mm	Peso kg	Portata max
39167	670 x 600 x 25	3,4	350
39177	770 x 600 x 25	4,3	350



Rampa EasyFold (a valigetta)

Adatta per differenze d'altezza ridotte. Si piega trasversalmente, per cui dispone di un'ampia superficie di scorrimento quando è aperta, richiedendo pochissimo spazio quando invece è chiusa. Può essere trasportata comodamente, come una valigia. Ottima per scooter e sedie a rotelle elettriche.

Art. nr.	Lunghezza mm	Peso kg	Portata max
30060-090	920	7,3	325
30060-120	1220	9,6	325
30060-150	1530	12,1	325
30060-180	1830	14,3	325

Rampa telescopica EasyFold (a valigetta)

Perfetta per compensare forti differenze d'altezza. Una rampa larga, facile da regolare alla lunghezza desiderata. Si piega trasversalmente ed è regolabile in lunghezza, per cui richiede meno spazio di altre rampe, anche durante il trasporto e l'immagazzinaggio.



Art. nr.	Lunghezza mm	Peso kg	Portata max
30070-180	1830/1120	16,4	325
30070-210	2130/1270	18,9	325
30070-240	2440/1430	21,4	325
30070-300	3050/1730	26,4	200



Rampe Lite

Peso ridotto – facili da trasportare

Le rampe Stepless Lite sono in assoluto le rampe più leggere presenti sul mercato grazie alla loro composizione unica di materiali di grafite e fibra di vetro.

Questa composizione di materiali speciali possiede le medesime caratteristiche di una racchetta da tennis: forza e leggerezza.



Alto livello di sicurezza, facile maneggevolezza

La superficie di scorrimento dispone di una copertura antiscivolo. Le rampe Stepless Lite sono facili da aprire e ripiegare. Esse dispongono di un solo cardine di ripiegatura, rendendo quindi molto semplice l'uso sia all'utente che all'assistente.

Il suo design dal peso leggero (la rampa pesa solo 3,5 kg per 700 mm) comporta anche la possibilità di poter essere comodamente trasportata su retro di una sedia a rotelle senza causare problemi di stabilità.

Le rampe Stepless Lite rappresentano la scelta ovvia per gli utenti/assistenti che desiderano un peso minimo, ma anche per chi, sulla sedia a rotelle, desidera essere più attivo. Eccezionali per i viaggi o per un giro in città.



Art. nr.	Tipo	Portata max kg	Peso kg	L x L mm
30100-070	Rampe Stepless Lite da 700 mm	300	3,5	700 x 730
30100-085	Rampe Stepless Lite da 850 mm	300	4	850 x 780
30100-125	Rampe Stepless Lite da 1250 mm	300	6	1250 x 780
30100-165	Rampe Stepless Lite da 1650 mm	300	7,5	1650 x 780
30100-205	Rampe Stepless Lite da 2000 mm	300	9,5	2050 x 780
30100-000	Borsa da sedia a rotelle per rampa da 700 mm			



Kit rampe Excellent **– Rampe passa cordolo (soglie)** **per diversi utilizzi**

Stepless lancia nuove serie dei noti kit rampe Excellent, che offrono migliori possibilità di adattamento. I nuovi kit sono disponibili con 2 diverse larghezze: 750 e 1000 mm ed anche con una nuova versione per esterno denominata "S" con SlipStop, che garantisce un'extra aderenza in caso di posizionamento all'esterno delle rampe.

Le rampe passa soglia sono vendute in kit, il che rende più facile la gestione e l'installazione delle stesse. I due livelli superiori sono separati per facilitare un accurato adeguamento in altezza. I

kit di rampe sono disponibili in diverse versioni per compensare dislivelli fino a 150 mm. Vengono consegnate complete di guida istruzioni ed accessori per l'assemblaggio e per regolazione finale.

Le serie in kit comprendono inoltre rampe a due lati con moduli angolari che hanno la stessa scorrevolezza di superficie di guida dei nuovi kit.

I kit di rampe Excellent sono prodotti ecologici - esenti 100% da PVC, 100% non tossici e sopportano una portata superiore a 1 ton.

larghezza 750 mm

Cod. Art.	Tipo	Largh. x Lungh. x Alt. mm
11-12100	Kit 0 - fino a 24 mm	750 x 125 x 24
11-12101	Kit 1 - fino a 42 mm	750 x 250 x 42
11-12102	Kit 2 - fino a 78 mm	750 x 500 x 78
11-12103	Kit 3 - fino a 114 mm	750 x 750 x 114
11-12104	Kit 4 - fino a 150 mm	750 x 1000 x 150
11-12105	Kit Add-on 1- riparaz. ¹⁾	750 x 62 x 15

larghezza 750 mm con SlipStop (uso esterno)

Cod. Art.	Tipo	Largh. x Lungh. x Alt. mm
11-12112	Kit 1S - fino a 42 mm	750 x 250 x 42
11-12113	Kit 2S - fino a 78 mm	750 x 500 x 78
11-12114	Kit 3S - fino a 114 mm	750 x 750 x 114
11-12115	Kit 4S - fino a 150 mm	750 x 1000 x 150

¹⁾ Kit Add-on1 - set per riparazioni

Utilizzato per aggiustamenti in altezza extra fino a 150 mm per i kit 1-4 o come set per riparazioni in caso di trasferimento kit 1-4.

²⁾ Kit Add-on100 - set per riparazioni

Usato per aggiustamenti in altezza extra fino a 150 mm per i kit 101-104 o come set per riparazioni in caso di trasferimento di kit 101-104.

larghezza 1000 mm

Cod. Art.	Tipo	Largh. x Lungh. x Alt. mm
11-12106	Kit 100 - fino a 24 mm	1000 x 125 x 24
11-12107	Kit 101 - fino a 42 mm	1000 x 250 x 42
11-12108	Kit 102 - fino a 78 mm	1000 x 500 x 78
11-12109	Kit 103 - fino a 114 mm	1000 x 750 x 114
11-12110	Kit 104 - fino a 150 mm	1000 x 1000 x 150
11-12111	Kit Add-on 100- riparaz. ²⁾	1000 x 62 x 15

larghezza 1000 mm con SlipStop (uso esterno)

Cod. Art.	Tipo	Largh. x Lungh. x Alt. mm
11-12116	Kit 101S - fino a 42 mm	1000 x 250 x 42
11-12117	Kit 102S - fino a 78 mm	1000 x 500 x 78
11-12118	Kit 103S - fino a 114 mm	1000 x 750 x 114
11-12119	Kit 104S - fino a 150 mm	1000 x 1000 x 150

Rampe per soglie con moduli ad angolo

Cod. Art.	Tipo	Alt. x Largh. x Lungh. mm
11-12501	Confezione 1 kit completo di rampe passa soglia con moduli angolari. Si adattano ad entrambi i lati della rampa. Dimensioni del lato inferiore: Dimensioni del lato superiore:	 21 x 1000 x 125 39 x 1250 x 250

Come scegliere la lunghezza della rampa


Scegliere sempre la rampa più lunga possibile. Maggiore è la sua lunghezza, minore è la pendenza, rendendola più semplice da superare. Le seguenti lunghezze di rampa vengono consigliate per le pendenze indicate:

Sedia a rotelle manuale con autopropulsione: pendenza massima 1:7.

Sedia a rotelle manuale spinta da assistente e sedia a rotelle elettrica: pendenza massima 1:5.

Grado d'inclinazione diagramma 1:5

Differenza di livello, mm

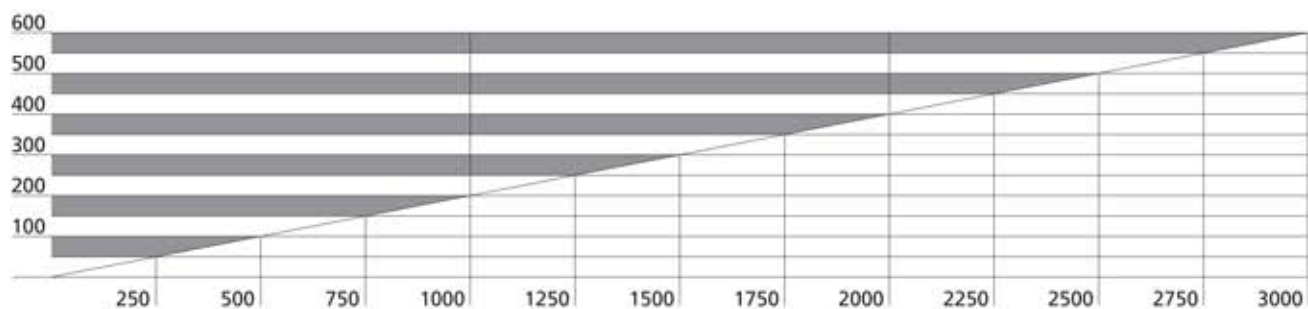

Lunghezza rampa, mm

SISTEMA A RAMPE FISSE

10


Questo sistema di rampe viene utilizzato per installazioni fissi di rampe stabili e sicure per esterni.



Alcuni esempi di kit di rampe sono illustrate di seguito. Un elenco completo di tutti i kit di rampe è disponibile da Guldmann. Le misure indicate sono misure interne.


Kit A

Altezza 1:20	60 mm
Lunghezza	1220 mm

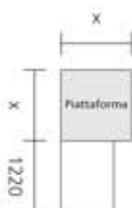


Kit C

Altezza 1:20	120 mm
Lunghezza	2440 mm

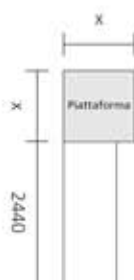

Kit D

Altezza 1:20	150 mm
Lunghezza	3050 mm

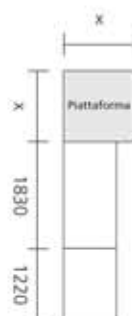

x = dimensione piattaforma 1220 x 1220 mm (misure esterne 1327mm/con piedini di sostegno 1490 mm)
 1520 x 1520 mm (misure esterne 1634mm/con piedini di sostegno 1796 mm)

Larghezza rampa: 910 mm (misure esterne 1021mm/con piedini di sostegno 1103 mm)

Sistema a rampe fisse

Stepless ha raccolto la sfida contro i sistemi a rampa tradizionali e pesanti. Il nuovo sistema a rampa è facile da maneggiare e si adatta alla perfezione nella maggior parte degli ambienti.

Con il nuovo sistema in alluminio abbiamo tenuto in considerazione le crescenti richieste e requisiti per migliorare gli ambienti di lavoro in cui i moduli devono pesare meno ma essere in grado di sopportare carichi pesanti.

Semplici da ordinare

Per rendere più semplici gli ordini, esistono circa 40 kit di rampe che vengono fornite complete di ringhiere di protezione, gambe di supporto, viti, ecc. È possibile ottenere da Guldmann un elenco completo che mostra tutti i kit di rampe disponibili.

Unità di sollevamento per carichi pesanti

Il sistema a rampa in alluminio può sopportare pesi fino a 385 kg.

Alta flessibilità

I moduli possono essere combinati e progettati in modo tale da soddisfare le richieste e i fabbisogni dell'utente.

Riutilizzo

La costruzione modulare e il ciclo di vita di 15 anni rendono il sistema a rampa ideale per il riutilizzo.

Facilità di adattamento

L'installazione così come lo smantellamento del sistema a rampa è semplice.

Rivestimento antiscivolo

Il rivestimento antiscivolo integrato è a misura di bambino, di cane guida e di tacchi alti, poiché viene prodotto senza margini pericolosi e senza fori sia nella piattaforma che nei moduli della rampa.


Consegna rapida

Questi moduli sono sempre a magazzino e possono quindi essere forniti in brevissimo tempo.




Kit F

Altezza 1:20	210 mm
Lunghezza	4270 mm

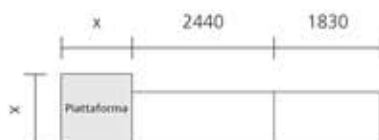


Kit O

Altezza 1:20	490 mm
Lunghezza	9760 mm

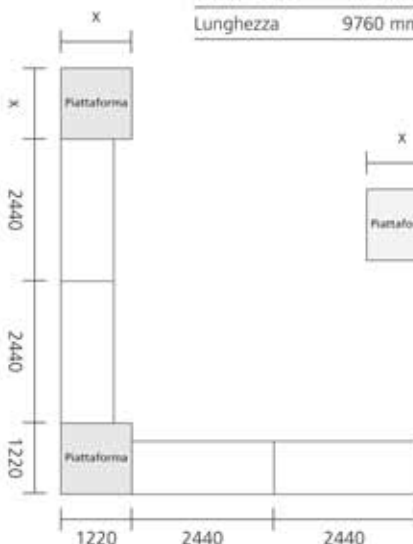

Kit P

Altezza 1:20	520 mm
Lunghezza	10370 mm

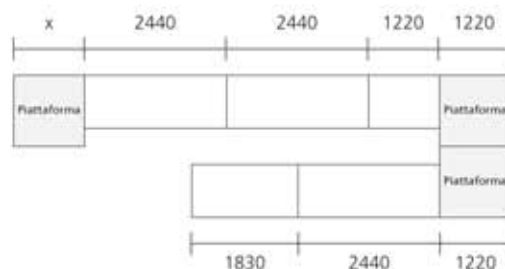

PIATTAFORME DI SOLLEVAMENTO

12

Le piattaforme di sollevamento sono state progettate per sollevare utenti di sedie a rotelle o persone con difficoltà di deambulazione fino a dislivelli di 2 metri. Le piattaforme di sollevamento richiedono meno spazio dei sistemi a rampa e sono quindi ideali in luoghi dove le rampe risulterebbero troppo ripide o lunghe.



LP 1

La piattaforma di sollevamento Stepless LP1 è una piccola piattaforma di sollevamento progettata per sollevare sedie a rotelle e persone con difficoltà di deambulazione in modo da superare piccoli dislivelli. Il modello LP1 è in grado di sollevare fino a 609 mm ed è progettato per luoghi con spazio limitato. La piattaforma di sollevamento si muove in modo silenzioso, progressivamente e ad una velocità controllata che garantisce all'utente di essere sollevato confortevolmente.

Necessita di minor spazio

Il modello LP1 richiede minor spazio rispetto ai sistemi a rampa ed è quindi ideale in luoghi dove una rampa risulterebbe troppo ripida o troppo lunga. È anche ideale per soluzioni temporanee o per fabbisogni immediati. La piattaforma di sollevamento LP1 può essere utilizzata sia all'esterno che all'interno e si integra facilmente nell'ambiente circostante.

Estrema sicurezza

Il modello LP1 presenta una rampa automatica comandata da un controllo manuale. L'accesso e l'uscita dalla piattaforma hanno luogo in corrispondenza alle due estremità della piattaforma di sollevamento. Il modello LP1 è semplice da usare, poiché l'accesso alla rampa garantisce che l'utente non scivoli oltre il bordo mentre la piattaforma è in movimento. Ci sono anche corrimano su entrambi i lati del modello LP1. L'intera piattaforma è ricoperta di materiale antiscivolo. Il modello LP1 è dotata di un soffietto di sicurezza e di una barra di serraggio sotto la piattaforma, nonché di un meccanismo di arresto di emergenza.

Facile installazione, manutenzione e riutilizzo

Il modello LP1 è di facile da installazione, manutenzione e trasporto. È anche particolarmente idonea per essere reinstallata.

Prodotto certificato

Il modello LP1 è marchiato CE in accordo con i seguenti standard:

- ISO 9386-1: Power-operated lifting platforms for persons with impaired mobility – Rules for safety, dimensions and functional operation
- EN 60601-1-2: Medical electrical equipment

Equipaggiamento opzionale

- Backup batterie
- Telecomando ad infrarossi
- Pannello di controllo esterno incluso interruttore con chiave
- Uscita laterale sinistra
- Uscita laterale destra

Specifiche

Funzioni

Altezza di sollevamento, max	500 (609) mm
Capacità di sollevamento	180 kg
Velocità di sollevamento	25 mm/sec
Altezza di sollevamento, min	95 mm

Dimensioni

Peso	57 kg
Dimensioni esterne, L x P	1167/883 mm
Dimensioni interne, L x P	1167/719 mm
Rampa d'accesso, L x P	350/712 mm

LP5

La piattaforma di sollevamento Stepless LP5 è progettata per adattarsi in modo armonioso alla maggior parte degli ambienti abitati. Con una capacità di sollevamento di 300 kg e un'altezza di sollevamento di 500 (875) mm, il modello LP5 è la scelta perfetta per gli utenti di serie a rotelle che devono superare dislivelli minori.



Comfort e funzionamento di alta qualità

I modelli LP5 e LP5+ sono facili da gestire, poiché su entrambe le piattaforme è collocato un pannello di controllo soft-touch integrato. All'occorrenza e se richiesto, sono disponibili pannelli di controllo esterni, un controllo manuale extra con cavo a spirale o un telecomando ad infrarossi. Con una larghezza interna di 900 mm la piattaforma si muove senza alcun rumore e progressivamente, garantendo all'utente di essere sollevato con comodità e sicurezza.

Obiettivo sicurezza

Il modello LP5 è dotato di un soffietto di sicurezza e di una barra di serraggio sotto la piattaforma, nonché di un meccanismo di discesa di emergenza. Inoltre il modello LP5+ dispone di un corrimano alto. È inoltre possibile acquistare separatamente un cancello di sicurezza per il livello superiore. La rampa automatica, controllata mediante il pannello di controllo, evita che l'utente si rovesci oltre il bordo mentre la piattaforma è in movimento.

LP5+

Grazie al design leggero, la piattaforma di sollevamento Stepless LP5+ è facile da integrare in ambienti diversi, sia pubblici che privati. La piattaforma di sollevamento consente agli utenti su sedia a rotelle ed alle persone con difficoltà di deambulazione di superare dislivelli fino a 875 mm. Il modello LP5+ dispone di un corrimano alto con inserti in plexiglass trasparente.



Prodotto certificato

I modelli LP5 e LP5+ sono marchiati CE in accordo con i seguenti standard:

- ISO 9386-1: Power-operated lifting platforms for persons with impaired mobility – Rules for safety, dimensions and functional operation
- EN 60601-1-2: Medical electrical equipment

Accessori opzionali

- Pannello di controllo esterno incluso interruttore con chiave
- Telecomando ad infrarossi
- Cancelli di sicurezza con chiusura di sicurezza (come previsto dalla legge per altezze superiori a 500 mm)



Specifiche

Funzioni

LP5 altezza di sollevamento max	500 (875) mm
LP5+ altezza di sollevamento max	875 mm
Capacità di sollevamento	300 kg
Velocità di sollevamento	13 mm/sec
Altezza di sollevamento, min	150 mm

Dimensioni

LP5 peso	118 kg
LP5+ peso	150 kg
Peso del cancello di sicurezza escluso la copertura	39 kg
Dimensioni esterne, L x P	1602 x 1076 mm
Dimensioni interne, L x P	1602 x 900 mm
Rampa d'accesso L x P	790 x 900 mm

Alimentazione

Primaria	230V / 115V
Secondaria	24V DC
Batterie	2 x 12V / 4,5 Ah



LP 8

La piattaforma LP8 è realizzata con un design nuovo e semplificato, che la rende facilmente integrabile nelle diverse tipologie di ambiente. Può essere impiegata in luoghi in cui l'utilizzatore ha necessità di superare differenze di livello fino a 3 metri. La piattaforma sollevatrice è un'eccellente, economica e pratica alternativa a sistemi di rampe fisse o montascale.

Semplice da utilizzare

La piattaforma sollevatrice LP8 consente alla maggior parte degli utilizzatori di rendersi indipendenti. I pulsanti di controllo sono facilmente accessibili e sono posizionati sulla piattaforma. I pannelli di controllo vengono forniti sul livello inferiore e superiore. I cancelli si aprono e si chiudono automaticamente.

Estremamente sicura

Pulsanti per lo stop di emergenza posizionati sui livelli operativi, banda di sicurezza sotto la piattaforma, discesa meccanica di emergenza e sistema di apertura/chiusura automatico dei cancelli, rendono la piattaforma sollevatrice estremamente sicura per l'utilizzatore. La piattaforma LP8 è testata ed approvata in accordo con la norma ISO 9386-1.

Facile assemblaggio e smontaggio

Tutto ciò che è necessario è una base stabile e piatta, spazio sul livello superiore ed una connessione 230 volts.

Accessori

- Vano di riscaldamento per cavi
- Discesa di emergenza elettrica tramite batterie
- Set di prolunga cavi per vano motore esterno
- Controllo remoto
- Pareti laterali e porte in vetro

Dati tecnici

Funzioni

Altezza di sollevamento, massima	3059 mm
Altezza di sollevamento, minima	79 mm
Capacità di sollevamento	300 kg
Velocità di sollevamento, massima	0,10 m/s
Velocità di sollevamento, media	0,07 m/s

Dimensioni

Peso	650 kg
Voltaggio	230 Volt
Corrente di controllo	24 Volt AC
Fusibile	10 A ritardato

Estremamente resistente alle condizioni climatiche

La piattaforma LP8 è realizzata con materiali resistenti a tutte le condizioni climatiche, sia a basse che ad alte temperature. Possono essere forniti cavi di riscaldamento per prevenire condizioni di gelo, se richiesto. La piattaforma standard viene fornita con pannelli a griglia di metallo perforato. E' comunque possibile ordinare pannelli in vetro temprato e laminato.

Le soluzioni per il trasporto pubblico spaziano dalle rampe singole alle piattaforme sollevatrici mobili, fino a prodotti progettati specificamente. La scelta di una soluzione dipende innanzitutto e fondamentalmente dal dislivello, ma anche dai fabbisogni personali, da ciò che si vuole effettivamente e dai requisiti applicabili quando vanno stabilite corrette condizioni di accessibilità.

Stepless ha sviluppato una gamma di soluzioni differenti per il trasporto pubblico, tutte con lo scopo di creare condizioni migliori per i passeggeri su sedia a rotelle e per coloro che hanno difficoltà motorie.

Possiamo offrire rampe portatili, piattaforme di sollevamento mobili nonché soluzioni speciali.

Rampe portatili

Le nostre rampe portatili possono essere utilizzate per il trasporto pubblico. I tre tipi seguenti sono molto comuni nei treni e negli autobus:

- rampa Lite – modello largo per il trasporto pubblico
- rampa Lite – standard
- rampa Easyfold & rampa telescopica Easyfold – standard

Soluzioni su misura per rampe per treni

Stepless ha progettato e prodotto specificamente un sistema di rampe in modo tale che gli utenti di sedie a rotelle possano salire e scendere dalle carrozze. Al personale del treno bastano 10 secondi per approntare la rampa e renderla pronta all'uso.

La rampa è di tipo pieghevole ed è collocata in uno scomparto della porta. La rampa si distingue per essere fissata a un braccio meccanico che assicura uno spiegamento rapido e sicuro della rampa stessa, senza che il personale del treno debba fare sforzi eccessivi.

Piattaforma di sollevamento LP11

Il modello LP11 è una piattaforma di sollevamento mobile sviluppata in particolare per sollevare utilizzatori di sedie a rotelle dentro e fuori dalle carrozze dei treni. Grazie al suo design ed alla costruzione leggera, il modello LP11 è facile da muovere e da posizionare. La piattaforma di sollevamento è facile e rapida da gestire e deve essere manovrata da una sola persona.

Misura adatta per tutti i treni

Il modello LP11 dispone di un equipaggiamento standard con una rampa a larghezza regolabile. La rampa può essere regolata in larghezza da 630-800 mm in modo tale da poter essere adattata a larghezze di porte di treni differenti.

Piattaforma di sollevamento LP12

Il modello LP12 è una piattaforma di sollevamento standard progettata in particolare per sollevare sedie a rotelle ecc. dentro e fuori dalle carrozze dei treni. La piattaforma garantisce che gli utenti di pesanti sedie a rotelle elettriche siano sollevati in modo semplice e sicuro da e nella maggior parte delle carrozze. Quando la piattaforma di sollevamento non viene utilizzata, si piega completamente e, quindi, richiede uno spazio minimo.

La piattaforma di sollevamento LP12 si è dimostrata ottimale per luoghi che presentano dislivelli, laddove si predilige una piattaforma mobile per venire incontro ai fabbisogni di sollevare una sedia a rotelle. Ciò potrebbe essere, per esempio, per piattaforme, palchi o simili.



Guldmann – momenti di libertà

Con il marchio Guldmann ci siamo impegnati principalmente a migliorare le condizioni di lavoro generali nell'ambito del sociale, ovvero quando c'è bisogno di assistenza nel muovere, sollevare e trasportare le persone.

- Sistemi di sollevamento
- Sistemi a binario
- Sistemi di sollevamento mobili
- Imbragature
- Lettini



Guldmann Consulting – Sviluppo competenze

Training personalizzati, corsi, progetti, seminari, lezioni, analisi e valutazioni:

- Ergonomia
- Promozione salute/sicurezza
- Risorse umane



Stepless – accessibilità per tutti

Con il marchio Stepless proponiamo soluzioni per l'accessibilità - soluzioni che offrono l'accesso all'ambiente circostante a chi ha difficoltà di deambulazione, per chi usa la sedia a rotelle o comunque necessita di un accesso facilitato.

- Rampe portatili e coprisoglia per le porte
- Sistemi di rampe fisse
- Piattaforme di sollevamento



V. Guldmann A/S

Head Office:
Graham Bells Vej 21-23A
DK-8200 Århus N
Tel. +45 8741 3100
Fax +45 8741 3131
info@guldmann.com
www.guldmann.com

Guldmann Srl

Via Focherini 7
I-43058 Sorbolo (PR)
N° Verde 800 781 604
Tel. +39 0521 660132
Fax +39 0521 691399
Cell. +39 340 9087107
italia@guldmann.com
www.guldmann.it